

86 ENG.A.CN.Rev2. C2/12 GETINGE 中国保留彩页更改权利



Getinge S-8666、S-8668 清洗消毒器

GETINGE 

秉承所有人员和团体都应获得优质医疗服务的坚定理念，Getinge 致力于为医院和生命科学机构提供各种产品和解决方案，旨在改善临床效果并优化相关工作流程。我们提供的产品和解决方案涉及重症监护、心血管手术、手术室、无菌再处理和生命科学等领域。Getinge 在全球拥有 10,000 多名员工，产品销往 135 个国家。

洁定消毒有限公司
迈柯唯（上海）医疗设备有限公司
上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO 20 层
邮编：201103
联系电话：021-61973999

清洗消毒器，禁忌内容或注意事项详见说明书，国械注进 20152113009，沪械广审（文）第 250621-09248 号

GETINGE 

智能控制 – 触手可及

全新的 Getinge S-8666、S-8668 清洗消毒器，可满足消毒供应中心、诊所及其它实际应用的需求。

多样化的可用程序、省时功能以及集成式过程监控功能（如喷臂旋转监控、由流量计控制的加液、循环压力监控）确保良好的清洁效果，同时实现产能效率高效化。这正是当下快节奏的医疗保健环境所需要的。

通过全新 CENTRIC 界面，相关信息均在高分辨率的大屏幕中显示，让操作人员一目了然。Getinge CENTRIC 提供独特的引导界面，在每种情况下仅显示操作人员需

要的信息。直观的引导界面旨在降低人为失误，使用户在短时间内学会正确操作清洗消毒器。另一个重要目的是支持操作人员自行解决使用过程中遇到的问题，保持物品顺畅流通，确保正常运行时间。Getinge S-8666、S-8668 提供多种高级选项，包括自动装载和卸载以及条形码扫描，可针对每个特定清洗架自动启动适合的清洗程序。

它为您提供了更为人性化的系统以及完善的数字式过程记录。所有这一切均触手可及。



全面智能化

• 器械周转快

用预热水箱，处理高效，大大缩短循环时间。

• 大处理量

有效利用腔体容积，从而提高装载量。

• 用户界面直观易用

大尺寸、高分辨率的 CENTRIC 触摸屏不仅操作简便，而且可直观显示清洗循环进程，在远处也清晰可见，同时菜单具有引导功能。

• 节省资金，保护环境

高效的设计减少耗水及耗能，降低每个过程成本。

• 喷臂旋转监控

如果喷臂未能正常旋转，系统会发出警报，从而确保有效清洗。



• 人性化设计

面板高度适中，易于操作。

• 运行时间

通过 Getinge ONLINE 可访问实时和历史过程信息，据此来安排预防性维护。

• 卫生学设计，易于清洁

优质抛光不锈钢表面光滑、圆角设计，少接缝、抗菌操作面板，可实现快速、简单的清洁。

• 过程监控与记录

监测并记录所有循环性能数据 - 通过 CENTRIC 用户界面可即时访问。记录可打印，也可用 USB 进行存储，或者可由 T-DOC 无菌供应管理和追溯系统读取。

CENTRIC 用户界面 助您成为专家

Getinge 全新的 GENTRIC 界面是一款高度创新且以用户为中心设计的系统，是我们根据客户的反馈意见及对客户情况的深入了解后设计的产品，实现良好的用户体验。

直观的用户界面

GENTRIC 按逻辑顺序清晰地显示所有信息，例如：剩余过程时间或启动选择。

- 易于掌握 - 减少培训需要
- 清晰简洁的信息 - 降低出现人为错误的风险

更高的用户满意度

大尺寸、高分辨率彩色显示屏易于读取，员工从远处即可清晰地查看和监视进度状态，从而提高用户满意度和生产率。凭借 GENTRIC 用户界面，Getinge 在提供以用户为中心的创新型综合解决方案方面更进一步，提高了处理效率。




状态一目了然



清晰简洁的信息



信息提示

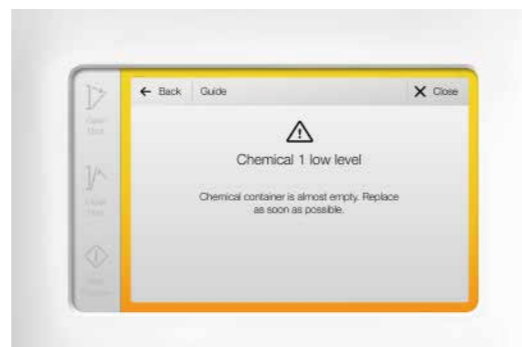

屏幕上显示指导信息

实时掌控

Getinge ONLINE

与我们最新系列产品中的其他设备一样，Getinge S-8666、S-8668 可全天候 24 小时与 Getinge ONLINE 连接。Getinge ONLINE 是一种独特的加密服务，通过连接电脑或智能手机即可访问您的设备中的信息。

- 实时和历史循环性能信息
- 机器使用情况和效率报告
- 快速提供故障排除通知和错误消息

T-DOC

Getinge 的器械追溯与资产管理解决方案，专为您器械的各方面管理而研发。T-DOC 通过为您提供器械和相关物品的实时概况，可使您优化投资并确保医院整体高质量地运作。T-DOC 可通过记录器械在整个使用周期内的情况将其与过程、具体操作、使用者关联在一起以确保可追溯性。在您需要器械时可随时查看，了解器械的所在位置。



监视屏 通过监视屏，可查看设备当前状态，无需查看电脑或清洗消毒器即可完全掌控剩余过程时间、警报与警告



Getinge ONLINE 可快速主动地排查故障，使运行更顺畅

物品顺畅通 满足需求

研究表明，人工费用占清洗消毒器总成本的 70% 之多。自动装卸系统降低了这些成本，从而最终降低了清洗和消毒的总成本。

自动装载台和卸载台

当清洗消毒器做好装卸准备时，自动装卸载台将自动完成装卸。清洗消毒器根据清洗架上的条形码自动启动相应的清洗程序。全自动装卸可缩短操作员处理时间，让操作员腾出时间执行其他任务。

Getinge 自动化系统

即使在狭窄拥挤的安装环境中，Getinge 全新的旋转台也可为装载留出足够的空间，便于操作。全新的自动化系统非常灵活，使清洗消毒器的摆放位置也变得更灵活，可将清洗消毒器放在靠近墙壁、柱子及其它具有挑战性的地方。对于扩展现有设施，过去是个难题，但现在可轻易解决。



独立装载台和卸载台

Getinge 自动化系统

经过全面测试

Getinge 开发的清洗剂系列在 Getinge 清洗消毒器中进行了全面测试和验证。

灵活的装载设备

我们提供多种多样的附件，适用于不同类型的物品和容量需求，包括各类清洗架。如需查看所有可选件，请参考 86 系列清洗消毒器的装载设备手册。




Getinge CLEAN 清洗剂系列



装载配置示例

信赖我们，助您安心

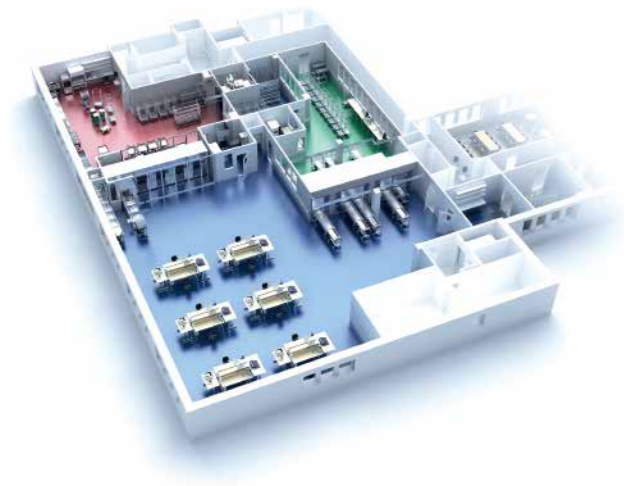

充分利用设施

如果您正在规划新的消毒供应中心或希望在现有设施中实现更顺畅的流程，您可联系 Getinge。我们相信，在优化您的消毒供应中心和区域的设计方面，我们的知识将发挥积极的作用。凭借在不同应用领域积累的丰富经验，我们的专家可从各方面为您提供详细建议，小到清洗消毒器的适宜安装位置、大到整个部门的效率提高和总购成本降低。

Getinge 学院

始终保持了解新规范、标准和质量保证是需要时间和精力。我们可在您和您的员工需要时准确提供所需的知识，从而节省您的时间和精力。定制课程是我们的核心产品之一，我们通过 Getinge 学院这一独特平台提供此服务。



Getinge CARE – 多级服务承诺

优化服务通常可在提高生产率和降低成本。Getinge CARE 服务包将确保设备保持卓越性能，并尽可能延长设备使用寿命。经 Getinge 认证的专家，加上我们的各种智能服务，可提高正常运行时间，有效降低总成本，从而实现成功运营。三种不同标准的服务包（金牌、白金和钻石）均可根据您的特定需求，为您量身定制理想的解决方案。

有关 Getinge 服务和支持的更多信息，请与当地的 Getinge 代表联系。

规格多样助您应对挑战

Getinge S-8666、S-8668 系列清洗消毒器具有两种型号可选。



外形尺寸 尺寸 mm

	S-8666	S-8668
宽	1110 mm	1110 mm
深	910 mm	990 mm
高	1870 mm	1870 mm