

Maquet Moduevo Bridge

Pensez horizontalité !

Getinge a développé une solution horizontale pour s'adapter aux contraintes architecturales : Moduevo Bridge. Ce bras de distribution plafonnier compact et a été conçu dans le but d'améliorer les interactions entre le personnel soignant et le patient indépendamment du niveau d'urgence, en conservant tout le nécessaire à portée de main. Il peut être installé dans les unités de soins intensifs pour des patients très dépendants, ainsi que dans les services de convalescence et aux urgences.



Solution avec le Sky Module.

Surmonter les contraintes de l'installation

- **Solution pour les pièces à plafonds bas :**
la hauteur de la colonne est réglable de 1 800 à 2 350 mm.
- **Un bon choix pour les grandes unités :** les unités peuvent être placées les unes à côté des autres pour économiser de la place. Vous pouvez également combiner différentes longueurs de colonnes de 2 200 à 3 500 mm.
- **Convient aux unités sans fenêtre :** la lumière Somnus fournit une simulation de lumière du jour.
- **Solution pour répondre aux besoins qui évoluent :**
Polyvalent, le système de positionnement ergonomique (EPoS) de Moduevo vous permet d'ajouter ou de retirer des équipements pour le positionnement, le maintien et le stockage.

Contribuer à un environnement propice à la guérison

- **Améliorer l'accès pour les soins des patients :** accès rapide et sans restriction* à la tête du lit du patient.
- **Examen médical :** l'adaptateur d'éclairage pour bloc opératoire en option vous permet d'ajouter plus de lumière avec Maquet Lucea (50 ou 100) ou Maquet Volista Access.
- **Vers une atmosphère apaisante, pour les patients, familles et personnel :**
jusqu'à six couleurs d'éclairage d'ambiance peuvent être intégrées au Moduevo Bridge.
- **Minimiser le bruit :** les freins électromagnétiques sont silencieux.


Répondre à des considérations économiques

- **Un pour deux :** une unité peut servir deux lits pour plus de flexibilité en cas d'afflux de patients.

*Par rapport à l'ancienne gamme de bras de distribution Maquet



Le bras peut être déplacé latéralement par une seule personne. Les bras de distribution peuvent être rapprochés ou éloignés.

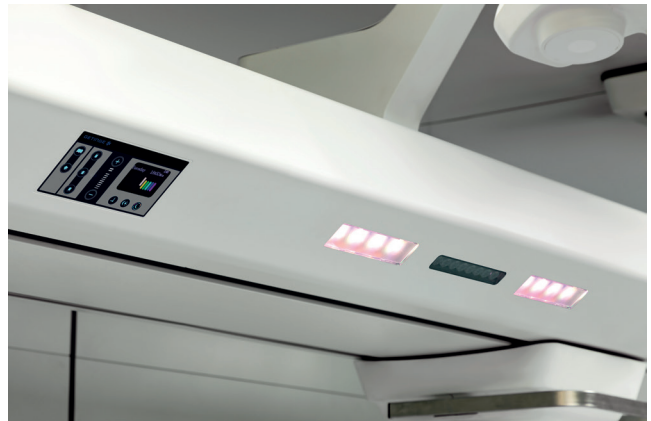

La lumière Somnus a été conçue conformément aux recommandations du Lighting Research Center (Centre de Recherche Eclairage). Les tons bleus simulent la lumière du matin, tandis que les tons rouges représentent la lumière du soir (basés sur le rythme circadien).



Solution rangement et perfusion



Solution premium

Caractéristiques techniques	Solution rangement et perfusion	Solution standard	Solution premium
Hauteur libre recommandée	1 800 à 2 000 mm	2 100 mm	2 350 mm
Longueurs des colonnes	2 200 ; 2 500 ; 2 800 ; 3 100 ; 3 500 mm		
Capacité de charge	Statif : 60 kg (30 kg de chaque côté) Panier : 130 kg	150 kg pour chaque navette	Avec bras pivotant de 400 mm : 120kg Avec bras pivotant de 600 mm : 80kg
Systèmes de freinage	Mécanique	Mécanique et électromagnétique	
Systèmes d'éclairage	Veilleuse dans la partie supérieure ; Lumière de lecture ou de travail ; Lumière Somnus et lumière ambiante colorée ; Adaptateur Bridge pour éclairage de bloc opératoire (Maquet Lucea ou Maquet Volista Access)		

Mentions légales : **MODUEVO** - Bras de distribution plafonnier destiné au support, positionnement et déplacement d'appareils médicaux, d'écran et tout autre accessoire compatible. Il permet également la distribution de courant ainsi que de gaz médicaux, d'air comprimé et de circuits d'aspiration (vide, évacuation des gaz d'anesthésie). Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123 Produit fabriqué par MAQUET (Suzhou) Co., Ltd, Chine. **VOLISTA ACCESS** - Eclairage opératoire destiné à éclairer le corps du patient lors d'opérations chirurgicales, de diagnostic, ou de traitement. **LUCEA 50 / LUCEA 100** - Eclairage opératoire destiné à éclairer le corps du patient lors d'opérations chirurgicales, de diagnostic, ou de traitement. Il s'agit de dispositifs médicaux de classe I. Produits fabriqués par MAQUET SAS, France. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation spécifique à chacun des produits. PUB-2020-0151-B, version de mars 2022.

Trouvez votre représentant commercial Getinge local :
Getinge France - Immeuble Illiade, 23 avenue Carnot 91300 Massy -
www.getinge.fr