



Effizient und nachhaltig

Genaue und gleichbleibende
konstante Ergebnisse mit dem
Getinge GSS67H Steam Sterilizer

GETINGE
GETINGE GROUP



P1
00:09
1



Ein kostengünstiger und umweltfreundlicher Sterilisator

Wir haben einen Wendepunkt bei der globalen Nachhaltigkeit erreicht. Nachhaltige Technologien sind keine Mehrwert-Lösungen mehr, die für einen Aufpreis zu haben sind, sondern sollten vielmehr zentraler Bestandteil des Alltagsgeschäfts sein.

Daher haben wir den Getinge GSS67H Steam Sterilizer so konzipiert, dass er umweltfreundlich ist, ohne die hochwertige Sterilisation zu beeinträchtigen, auf die sich Ihr Krankenhaus verlässt.

Der Getinge GSS67H Steam Sterilizer bietet Ihnen wesentlich mehr als ein handelsüblicher Dampfsterilisator, zum Beispiel die Möglichkeit zur Sterilisation

mit Reindampf auf der Grundlage von hochwertiger Technologie, die ohne zusätzliche Kosten weniger Wasser und Energie verbraucht.



Verlängerte Lebensdauer von Ausrüstung und Instrumenten

Investitionen bestmöglich vornehmen

Gelöste Metalle und Mineralien im Dampf können zu Verfärbungen und Kalkablagerungen in der Kammer führen. Somit kann es im Laufe der Zeit auch zu Instrumentenverfärbungen, Lochfraß oder Korrosion kommen.

Ein Reindampfprozess kann die langfristigen finanziellen Auswirkungen von vorzeitigem Instrumentenwechsel und Ausrüstungsausfällen verringern.

Zur Standardausstattung des GSS67H Sterilizer gehört ein Reindampfsystem. Wir verwenden Rohrleitungen, Ventile und andere Komponenten aus hochwertigem Edelstahl im GSS67H Sterilizer, um die Versorgung mit


reinem Dampf sicherzustellen. Optionen für integrierte Edelstahlkessel und die Speisewasseraufbereitung sind ebenfalls erhältlich.

Das Ergebnis ist ein zuverlässiges, effizientes System, das die Betriebskosten senkt und gleichzeitig den finanziellen Aufwand für Ausfallzeiten und Geräteaustausch minimiert.

Schnelle, umweltfreundliche Zyklen

Um den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu senken, muss man keine längeren Durchlaufzeiten hinnehmen. Eine hocheffiziente Vakuumpumpe gehört zur Standardausstattung des GSS67H Sterilizer. Diese Pumpe senkt nicht nur den Wasserverbrauch immens, sondern verringert auch die Zykluszeit für einen höheren Durchsatz.

Zudem verfügt der GSS67H Sterilizer standardmäßig über ein Wassersparsystem, welches einen Großteil des Wassers zurückführt, das zur Kühlung und Schmierung der Vakuumpumpe verwendet wird. Einfach spitzenmäßig für die Umwelt und den Geldbeutel!

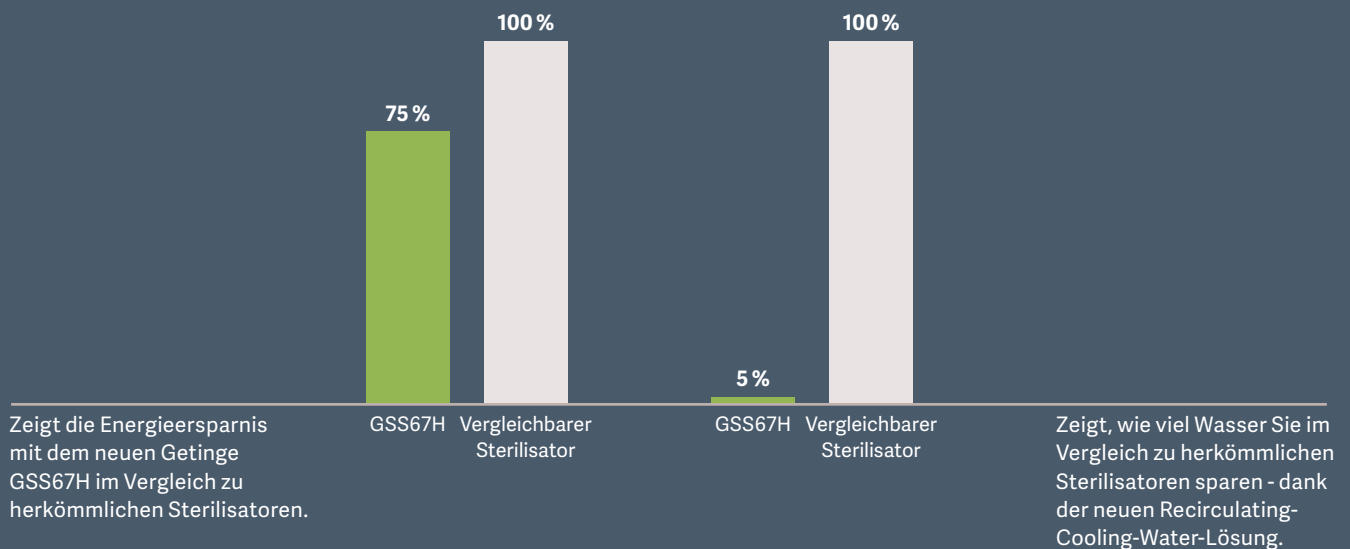

Bis zu **20–30 %** weniger
Energieverbrauch

Bis zu **95 %** weniger
Wasserverbrauch

Verbesserter Workflow

für mehr Effizienz

Der GSS67H Sterilizer wurde in Zusammenarbeit mit Anwendern von Sterilisatoren und ZSVA-Managern entwickelt, um ein intuitives und effizientes System zu schaffen, das das Risiko für menschliches Versagen reduziert. Der Sterilisator kann auch die Beladekapazität erhöhen, den Durchsatz verbessern und die Stillstandszeiten für Reinigung und Prüfung reduzieren.

Optimiertes Kammerdesign

Das Design maximiert die Beladekapazität pro Zyklus und reduziert gleichzeitig den Platzbedarf. Äußerst flexible Beladekonfigurationen ermöglichen die Platzierung von hohen Behältern und Verpackungen unterschiedlicher Größe. Eine vertikale Tür benötigt weniger Stellfläche als horizontal gleitende Türen, was den Platzbedarf der Einheit minimiert.

Automatische An- und Abschaltfunktion

Das automatische Anlaufsystem reduziert die Zeit bis zum Start des ersten Prozesses effektiv und der Kammermantel vor der Systemprüfung kann effektiv einen zusätzlichen Sterilisationszyklus pro Schicht hinzufügen, um den Gesamtdurchsatz zu erhöhen.

Intuitive Benutzeroberfläche

Der GSS67H Sterilizer ist mit einer innovativen und bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche ausgestattet. Das intuitive Design reduziert den Schulungsbedarf und kann auch von weniger erfahrenen Mitarbeitern problemlos bedient werden.

Das große hochauflösende 10-Zoll-Display ist auch aus der Entfernung einfach abzulesen und zu überwachen. Der Bildschirm zeigt die wichtigsten Prozessinformationen klar und übersichtlich an, wie z. B. die verbleibende Zykluszeit und die beim Starten getroffene Auswahl.



Status auf einen Blick: Die verbleibende Reinigungsdauer ist auch aus einiger Entfernung gut zu erkennen.



Hygienisches, leicht zu reinigendes Design

Hochwertige, polierte Edelstahloberflächen mit glatten, abgerundeten Ecken. Eine Spülkammertür und wenige Nähte erleichtern die schnelle und effektive Reinigung.

RFID-fähige Anmeldung

Eine elektronische RFID-Anmelde-Funktion steuert den Anwenderzugriff. Dabei wird die gleiche Sicherheitskodierung verwendet wie sonst auch in der Einrichtung, um Zeit zu sparen, das Risiko menschlichen Versagens zu senken und die Rückverfolgung zu verbessern.



Die Benutzeroberfläche liefert klare und übersichtliche Informationen – und zwar nur die Informationen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen, nicht mehr.



Klare und einfach zu verstehende Hilfen zur Problembeseitigung oder für den Zugang zu erweiterten Funktionen sind über die Benutzeroberfläche direkt verfügbar.



Jeder ausgelöste Alarm wird mit Bildschirmhinweisen für die jeweils zu ergreifenden Maßnahmen angezeigt.

Effizientes Be- und Entladen

für den ergonomischen Transport steriler Güter

Getinge bietet eine Auswahl an automatischen und manuellen Beladesystemen, um den täglichen Arbeitsablauf in Ihrer zentralen Sterilgutabteilung zu verbessern und gleichzeitig für mehr Bedienkomfort und Sicherheit zu sorgen.

Intelligente Rollwagen bewegen mühelos schwere Lasten

Getinge Smart Trolleys sind einfach zu manövrieren und zu reinigen und zeichnen sich durch eine fast mühelose halbautomatische Be- und Entladung aus. Die elektrische Power-Drive-Funktion hilft, schwere Lasten mühelos aus dem Stillstand zu bewegen und reduziert so die ergonomische Belastung.

Automatisches Be- und Entladen erhöht die Effizienz

Der Getinge Automatic Loader/Unloader GL64 ist ein vollautomatisches System zur Entladung/Beladung eines Getinge GSS67H Sterilizer mit Ladegut. Das System optimiert die Handhabung von Ladegut, ohne dass eine direkte Überwachung durch den Benutzer erforderlich ist. Es minimiert die manuelle Handhabung und unterstützt einen ergonomischen Arbeitsablauf für das Personal.

Besserer Durchsatz mit dem Air Glide System (AGS)

Die innovative, vollständig automatische Lösung von Getinge mit einem einzigen Beladepunkt verbessert den Durchsatz für ZSVAs mit mehreren Sterilisatoren. In dem Moment, in dem ein Sterilisator frei ist, wird er automatisch neu beladen. Dies ermöglicht eine maximale Verfügbarkeit und Auslastung.



Intelligente AHT-Rollwagen für die Be-/Entladung.

Wir bieten komplette, effiziente, wirtschaftliche und ergonomische Handlingsysteme für Körbe und Container. Ob automatisch oder manuell: Wir passen jedes Detail individuell an, um die Arbeit für jede ZSVA leichter und effizienter zu machen – egal, ob Sie einen oder zehn Sterilisatoren nutzen!



Automatische Be- und Entladeeinheit für Körbe (GL64B).



Automatische Be- und Entladeeinheit für Einsatzgestelle (GL64SR).

Effizientes Datenmanagement

rationalisiert den Arbeitsablauf und stellt die Verantwortlichkeit sicher



Die bewährten Praktiken Ihrer zentralen Sterilgutversorgungsabteilung stehen im endlosen Kampf gegen Krankenhausinfektionen an vorderster Stelle. Die Möglichkeit, Sterilitätsdaten effizient zu dokumentieren und abzurufen, bietet Aufsichtsbehörden, Akkreditierungsorganisationen und einer immer besser informierten Öffentlichkeit Sicherheit.

Echtzeit-Zugriff auf Daten

Getinge Online ist Ihr persönliches Kundenportal im Web, das von Ihrem Computer oder Smartphone aus einen On-Demand-Zugriff auf die Gerätedaten ermöglicht. Dieses sichere und verschlüsselte Online-Tool liefert sowohl Echtzeitdaten als auch historische Leistungsdaten, Informationen zu Ersatzteilbestellung, vorbeugender Wartung und Maßnahmen zur Fehlersuche.

Erfassung und Speicherung von Echtzeit-Zyklusdaten

Getinge GSS67H Steam Sterilizer lassen sich in T-DOC, unsere Lösung für das Sterilgut-Management, integrieren und versorgen das System mit Echtzeit-Zyklusdaten. Das ist eine wertvolle Informationsquelle für ZSVA-Manager und Krankenhausverwalter, um Probleme zügig beheben, die Produktionsplanung verbessern und die Konformität überprüfen zu können.



Achten sie gut auf Ihre Investition

Der optimierte Service für Ihre Geräte ist eine Möglichkeit, die Produktivität zu erhöhen und Kosten zu senken. Ein Care-Servicepaket von Getinge gewährleistet, dass Ihre Geräte auf höchstem Niveau arbeiten, damit Sie sich auf das Retten von Menschenleben konzentrieren können.

Probleme verhindern, bevor sie entstehen

Sie möchten einen neuen Dampfsterilisator oder eine ganze ZSVA erwerben? – Wir sind für Sie da und unterstützen Sie gerne. Durch Einhaltung eines routinemäßigen, vorbeugenden Wartungsplans sorgt Getinge Care dafür, dass alles rund läuft und es nur wenige Unterbrechungen

gibt. Muss etwas dringend erledigt werden, sind unsere zertifizierten Kundendienstmitarbeiter sofort zur Stelle, um Ihnen zu helfen und das Problem zu lösen.

Mit einem Getinge-Care-Paket sind Sie in der Lage, die Kosten über die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu prognostizieren und ungeplante Ausgaben zu minimieren. Unser Team für Finanzdienstleistungen analysiert Ihre Kennzahlen und bietet Ihnen ein bedarfsgerechtes Investitions- und Servicepaket an, das Ihren Anforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie über die zuständige Getinge-Vertretung.



Getinge Care Partner

Unterstützung
Ihrer hausinternen
technischen
Serviceabteilung



Getinge Care Preventive

Feste
Wartungsintervalle
für maximale
Verfügbarkeit



Getinge Care Plus

Vollständiger
Schutz bei voller
Kostenkontrolle



Getinge Care Premium

Vollständige
Versorgung –
ohne Sorgen



Getinge Assured Indicators

Garantierte Sterilität

Therapieassoziierte Infektionen stellen eine enorme Belastung für das Gesundheitssystem dar. Eine unabhängige Prüfung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Systeme und Verfahren wie vorgesehen funktionieren.

Der routinemäßige Einsatz unserer Getinge Assured Indicators bietet Ihnen den unabhängigen Nachweis, dass der Sterilisationsprozess konstant und effektiv durchlaufen wurde. Sterilitäts- und Qualitätssicherungs-Produkte von Getinge sorgen für eine äußerst zuverlässige Verifizierung und Dokumentation der Geräte- und Prozessleistung.

Getinge Assured Indicators können im Zuge eines Sterilisationsaudits oder zur routinemäßigen Leistungsüberwachung verwendet werden, um Leistungsbeanstandungen zu vermeiden.

Der Getinge Bowie-Dick Type Test Monitor ist der Standard für die tägliche Überprüfung der mechanischen Funktion Ihres vakuumunterstützten Dampfsterilisators und gewährleistet, dass sein Luftentfernungssystem ordnungsgemäß arbeitet.




Zusätzlich zu den Bowie-Dick-Testpackungen umfasst das umfangreiche Getinge Assured Sterility Assurance Portfolio Folgendes:

- Inkubatoren und Zubehör
- Chemische Indikatoren
- Sterilisationsbänder von Getinge
- Biologische Indikatoren – Dampf und EO
- Steuersysteme (Ladung)
- Druckerpapier und Zubehör
- Aufzeichnungsprodukte
- Reinigungskontrolle
- Oberflächenüberwachung

Finanzierungsmöglichkeiten, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind

Getinge Financial Services

Getinge ist mehr als ein globaler Anbieter modernster medizintechnischer Ausrüstung

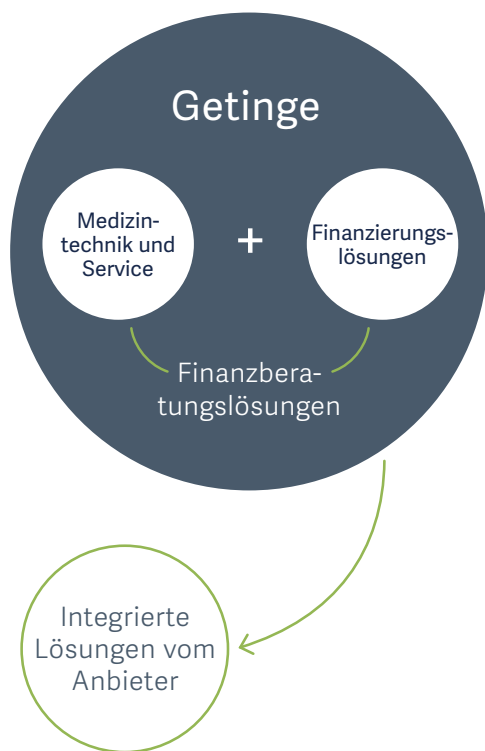

Getinge Financial Services hilft Ihnen, durch eine maßgeschneiderte Beratung die richtige Finanzierung für die richtigen Produkte zu finden.

Unser engagiertes Team wird Sie in jeder Phase des Prozesses unterstützen und Ihnen helfen, die verschiedenen Finanzierungsoptionen zu verstehen und die beste Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, wenden Sie sich einfach an Ihren Getinge-Vertriebsmitarbeiter!

info.financialservices@getinge.com

Wir stellen integrierte Lösungen bereit und bieten Ihnen eine Mischung aus umfangreichem wirtschaftlichen Engagement und Finanzexpertise, die im medizintechnischen Bereich einzigartig ist. Aufgrund unserer starken Fokussierung auf regionale Präsenz haben wir ein Verständnis für die spezifischen geschäfts- und länderspezifischen Anforderungen und Herausforderung gewonnen.

Sichere Finanzierung zu wettbewerbsfähigen Preisen

Getinge Financial Services (GFS) ist ein verlässlicher Kundenfinanzierungspartner, der gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten wird, dass Sie die beste Medizintechnik auf dem Markt erhalten und finanzieren können. Unsere erfahrenen Finanzanalysten können eine erfolgreiche Bilanz bei der Arbeit mit öffentlichen und privaten Krankenhäusern vorweisen.

GFS ist ein Wegbereiter, der Ihre Bedürfnisse versteht und, zusammen mit unserem Vertriebsteam, die richtige, an Ihre Anforderungen angepasste Lösung mitgestaltet. Unsere stabilen und langjährigen Beziehungen mit Exportkreditagenturen, Partnern vor Ort und einem engagierten Kreis an Kreditgebern ermöglichen es uns, Ihnen eine breite Palette an Finanzierungs-lösungen anzubieten.

Wenn Sie GFS als Partner an Ihrer Seite haben, profitieren Sie von angepassten Lösungen, die Ihnen Flexibilität, wettbewerbsfähige Preise und eine Befreiung von Budgetzwängen und langwierigen Prozessen ermöglichen.

Sind Sie auf der Suche nach einer Finanzierungslösung für kleine oder mittlere Transaktionsvolumina?

Dann sprechen Sie mit uns! Unsere Finanzierungslösungen sind nicht nur für große Auftragsvolumen, sondern auch ideal für kleine und mittlere Transaktionsvolumina geeignet. Unsere schrittweise Vorgehensweise soll den Finanzierungsprozess so einfach und transparent wie möglich für Sie machen.

Technische Daten



Konfigurationen (doppeltürige Modelle)

	Einheit	6710	6713	6717	6720
Kammerbreite	mm/in.	660/26	660/26	660/26	660/26
Kammerhöhe	mm/in.	700/27,5	700/27,5	700/27,5	700/27,5
Kammertiefe	mm/in.	1.000/39,37	1.300/51,18	1.700/68,93	2.000/78,74
Kammervolumen (doppeltürig)	l/cu ft.	481/17	621/21,9	809/28,6	937/33,09
Kapazität (Körbe*)	Stück	6	9	12	12
Kapazität STE**	Stück	6	8	10	12

* Korbgröße SPRI: 585 × 395 × 195 mm/23 × 15,55/2 × 7,68 in (L × B × H)

ISO: 600 × 400 × 200 mm/23,6/8 × 15,75 × 7,87 in (L × B × H)

** STE-Größe: 600 × 300 × 300 mm/23,6 × 11,81 × 11,81 in (L × B × H)



Getinge ist ein globaler Anbieter von innovativen Lösungen für Operationssäle, Intensivstationen, Sterilisationsabteilungen sowie für Unternehmen und Institutionen im Bereich Life Science. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen aus erster Hand und engen Partnerschaften mit klinischen Experten, medizinischen Fachkräften und medizintechnischen Spezialisten verbessern wir den Alltag der Menschen nicht nur heute, sondern auch morgen.

Getinge Infection Control AB · PO Box 69 · SE-305 05 Getinge · Sweden · +46 10 335 00 00 · info@getinge.com

Ihren lokalen Getinge-Vertriebspartner finden Sie unter der folgenden Adresse:

Getinge Deutschland GmbH · Kehler Str. 31 · 76437 Rastatt · Deutschland · +49 7222 932-0 · info.vertrieb@getinge.com

Getinge Österreich GmbH · Lemböckgasse 49 · 1230 Wien · Österreich · +43 1 8651487-0 · info-at@getinge.com

Getinge Schweiz AG · Wilerstrasse 75 · 9200 Gossau · Schweiz · +41 71 335 03 03 · info@getinge.ch

www.getinge.com