



Bras de distribution plafonnier Maquet Moduevo PLG-II SKY

Vers l'amélioration de la
connectivité des dispositifs
médicaux mobiles



Vers l'amélioration la connectivité des dispositifs médicaux Maquet Moduevo PLG-II SKY

Maquet Moduevo PLG-II SKY fournit des dispositifs médicaux mobiles pour bloc opératoire (y compris appareil d'anesthésie, machine cœur-poumon ou dispositifs endoscopiques sur un chariot) avec alimentation, gaz et signaux de transmission.

Conditions de travail

- Réglable en hauteur jusqu'à 400 mm, PLG-II SKY est un bras de distribution plafonnier ergonomique qui s'adapte aux différentes dimensions des appareils. Adaptable à la taille du personnel médical, il permet d'accéder aux prises gaz et aux prises de courant.
- Facile à manœuvrer grâce à sa poignée externe, pour un positionnement correct pendant les procédures et un bon positionnement en position de repos, ce qui vise à faciliter les conditions de nettoyage.
- Equipement intuitif grâce à une grande capacité de câble avec prises gaz et prises de courant des deux côtés ainsi que dans le panneau inférieur.
- Un éclairage d'ambiance intégré en option peut être ajouté au niveau du panneau inférieur pour fournir un éclairage pendant les procédures mini-invasives ou pour aider l'anesthésiste à avoir la visibilité nécessaire sur le patient.
- Une fois l'opération terminée, le nettoyage est facilité, le bras permet un dégagement de la tête grâce à la position de repos et à la hauteur souhaitée.

Convient à différents blocs opératoires

- Grâce à un rayon de portée de 2 975 mm max., le PLG-II SKY offre la flexibilité de positionner l'appareil d'anesthésie du côté gauche du pied pour la neurochirurgie ou du côté droit de la tête pour d'autres types d'interventions.
- Solution personnalisable grâce à la modularité de la hauteur et de la longueur du tube de suspension, il peut donc être adapté à différentes configurations de pièce.
- Dans les blocs opératoires hybrides, il vise à offrir plus de liberté en termes de configuration, car il peut être installé hors des rails de plafond.


Flexible

- En fonction de vos besoins futurs, vous pouvez toujours réserver de l'espace pour de nouvelles prises informatiques grâce à une capacité de câble élevée.
- Compatibilité avec l'option Beam Plus, ce qui permet d'ajouter un moniteur, un examen ou même un éclairage opératoire à moindre coût sans point d'ancrage supplémentaire.
- Le bras Maquet Moduevo PLG-II SKY ne nécessite pas d'électricité, ce qui réduit la consommation d'énergie.

- + Conditions de travail
- + Convient à différents blocs opératoires
- + Flexible



Explorer Maquet Moduevo PLG-II SKY

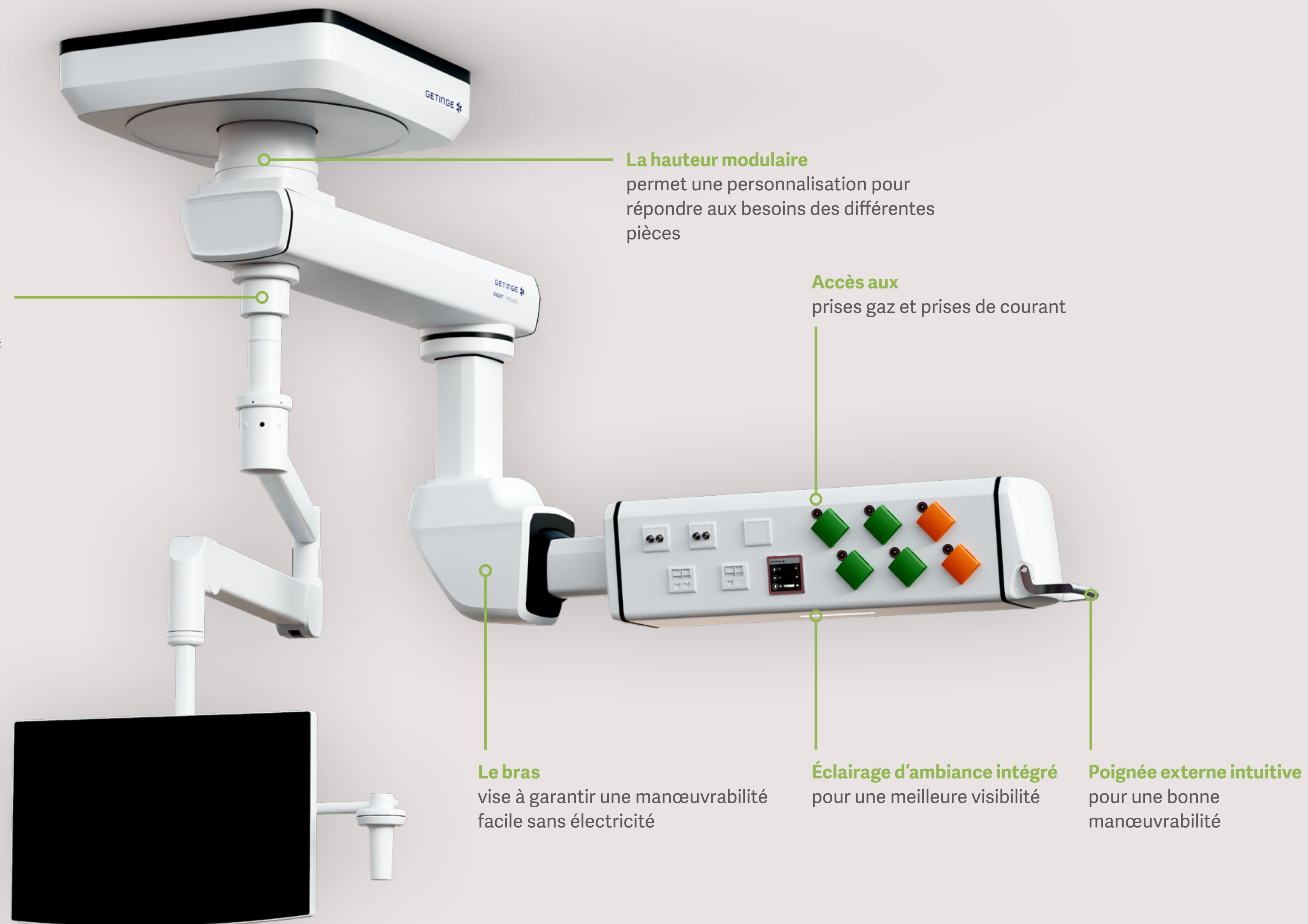

L'option Beam Plus

dans le but de simplifier la connexion d'un moniteur ou d'un éclairage sans dispositif d'ancrage supplémentaire

La hauteur modulaire

permet une personnalisation pour répondre aux besoins des différentes pièces

Accès aux

prises gaz et prises de courant

Le bras

visé à garantir une manœuvrabilité facile sans électricité

Éclairage d'ambiance intégré

pour une meilleure visibilité

Poignée externe intuitive

pour une bonne manœuvrabilité



Maquet Moduevo PLG-II SKY

Caractéristiques techniques

Mode	Configuration PLG-II SKY Distributeur	Rayon de portée	Mouvement vertical
Mode faisceau unique	sur ancrage	1 475 mm	400 mm
Mode SAT-PLG	sur SATTELITE		
Mode double faisceau	avec LL6-0	2 075 mm	
	avec LL9-0	2 375 mm	
	avec LL12-0	2 675 mm	
	avec LL15-0	2 975 mm	

Mentions légales - MODUEVO - Bras de distribution plafonnier destiné au support, positionnement et déplacement d'appareils médicaux, d'écran et tout autre accessoire compatible. Il permet également la distribution de courant ainsi que de gaz médicaux, d'air comprimé et de circuits d'aspiration (vide, évacuation des gaz d'anesthésie). Il s'agit d'un dispositif médical de classe IIb, CE0123. Produit fabriqué par MAQUET (Suzhou) Co., Ltd, Chine. Pour un bon usage, veuillez lire attentivement toutes les instructions figurant dans la notice d'utilisation du produit. PUB-2023-0067-A, version de mars 2023.



Convaincue que tout le monde devrait pouvoir bénéficier des meilleurs soins possibles, Getinge propose aux établissements de santé et des sciences de la vie des solutions visant à améliorer les résultats cliniques et à optimiser les flux de travail. Notre gamme de produits et de solutions est destinée aux soins intensifs, aux procédures cardiovasculaires, aux blocs opératoires, aux services de retraitement stérile ainsi qu'aux sciences de la vie. Getinge compte plus de 10 000 employés dans le monde et ses produits sont commercialisés dans plus de 135 pays.

Manufacturer: Maquet (Suzhou) Co., Ltd · No.158 Fangzhou Road · Suzhou Industrial Parl · 215024 Suzhou · China · +86 (0) 512 62839880

Trouvez votre représentant commercial Getinge local sur le site :
Getinge France · 23 Avenue Carnot – 91300 Massy · +33 2 38 25 88 88 · accueil.FRARD@getinge.com

www.getinge.fr